

Multi
SAÚDE



Clearpik Portable
Irrigador Oral - HC036
Manual de Instruções






Você está pronto para uma saúde bucal melhor e um sorriso mais saudável? Com a combinação de pressão d'água e pulsos, o Irrigador Oral Clearpik Personal da Multi Saúde remove as bactérias nocivas que ficam profundamente entre os dentes e sob a linha da gengiva onde a escovação simplesmente não alcança.


LIMPEZA TRADICIONAL

O uso de fio dental tem acesso limitado a escovação tradicional não alcança sob a linha da gengiva facilmente restos de comida e bactérias nocivas.

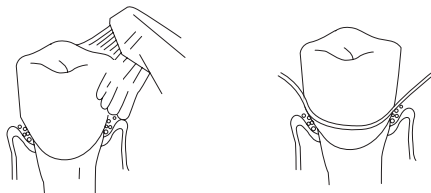

LIMPEZA DO IRRIGADOR ORAL

Remove restos de comida e bactérias nocivas com pulsos de água de alta frequência.

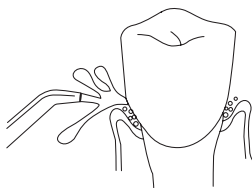

CUIDADOS IMPORTANTES

Quando usar equipamentos eletrônicos, especialmente quando houver crianças presentes, sempre siga as precauções de segurança abaixo.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

AVISO!

Para reduzir o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndio e ferimentos graves:

- Não manuseie o carregador com mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho dentro d'água.
- Não use no banho.
- Não coloque o produto em um local onde ele possa cair ou ser empurrada em uma banheira, box de chuveiro ou pia.
- Não apanhe o produto que caiu em água, desligue-o da tomada imediatamente
- Verifique se há dano no cabo de alimentação antes de usar pela primeira vez e durante o tempo de uso do produto.
- Não ligue este dispositivo em um sistema de tensão diferente do especificado no dispositivo ou carregador.
- Não use este produto se ele estiver com o cabo ou tomada danificados e se não funcionar devidamente. Bem como se tiver sofrido uma queda ou dano ou se caiu em líquido. Entre em contato com a Multilaser, ou seu distribuidor local.
- Não direcione o jato d'água sob a língua, dentro do ouvido, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz de produzir pressão que pode causar dano sério nestas áreas. Consulte "Instruções de Uso" para mais

informação no uso correto

- Use este produto apenas como indicado nestas instruções e de acordo com as indicações de seu profissional de saúde bucal.
- Use este produto apenas como indicado nestas instruções e de acordo com as indicações de seu profissional de saúde bucal.
- Preencha o reservatório apenas com água.
- Não deixe cair ou insira nenhum objeto estranho em qualquer orifício do aparelho.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- Não opere o aparelho onde se estiver usando oxigênio e aerossóis.
- Não use enxaguantes bucais que contenham iodo, água sanitária ou óleo de melaleuca.
- Não ligue o produto enquanto usa piercings na boca.
- Remova antes de ligar.
- Não use se tiver um ferimento aberto na boca ou língua.
- Se seu médico ou cardiologista prescrever medicação antibiótica antes de procedimentos dentais, você deve consultar seu dentista antes de usar este aparelho ou qualquer higienizador.
- Para uso doméstico apenas. Não use fora de casa.
- Instrua cuidadosamente e supervise crianças e pessoas com necessidades especiais no uso correto deste produto.
- Crianças devem ser supervisionadas para que se certifiquem de que não brinquem com o aparelho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E ACESSÓRIOS



Bico de limpeza que possui sistema giratório em 360°

Botão para a troca do bico de limpeza

Botão liga e desliga

Luzes LED que indicam a intensidade da pressão do jato de água

Entrada para o cabo de carregamento

Reservatório rosqueável de 220ml

Tubo que suga a água do reservatório

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 8 x 6,6 x 22,7 cm

Peso Líquido: 262g

Voltagem: 5V

Potência: 5W

Reservatório: 220ml

Conteúdo da Embalagem: 1 irrigador oral portátil, 2 bicos clássicos com caixa higiênica, 1 bolsa para transporte, 1 cabo de carregamento e 1 manual de instruções

IMPORTANTE: Esse irrigador oral foi projetado para uso pessoal e doméstico não devendo ser usado para acompanhamento médico.


PROCEDIMENTOS DE USO

- A unidade contém uma bateria de lítio. Na extremidade, o botão é usado para fazer o ciclo entre os diversos modos: Modo padrão - modo suave - massagem - desligado.
- Ele se desligará automaticamente se pressionar o botão por mais de 1 segundo.
- Se um modo ficar ativo por mais de 120 segundos, o aparelho se desligará automaticamente.
- Quando estiver carregando, as três luzes piscarão sequencialmente, quando as mesmas se mantiverem ligadas a unidade estará carregada.
- O aparelho não deve ser usado enquanto carrega.
- Para melhor resultado, mantenha o aparelho de pé.
- Direcione o jato, girando o botão no topo do cabo.



INÍCIO

Importante! Mantenha o aparelho desligado e carregue-o por 24 horas na energia elétrica, para que esteja completamente carregado. Ligue o cabo de alimentação em qualquer tomada. Não use o aparelho até a carga completa.

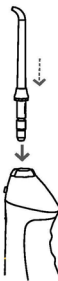


INSERINDO E REMOVENDO BICOS

Insira o bico no centro do botão na parte superior do cabo, o anel colorido deve ser encaixado na extremidade do botão se o bico estiver travado corretamente.

Como visto na figura abaixo, com o reservatório d'água


Para remover o bico do cabo, pressione o botão de desprendimento do bico e puxe o bico do cabo.

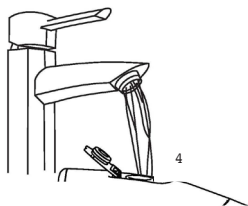



TÉCNICA RECOMENDADA



Curve-se com proximidade de uma pia e coloque o bico na boca. Mire o bico na direção do dente. Ligue o aparelho.

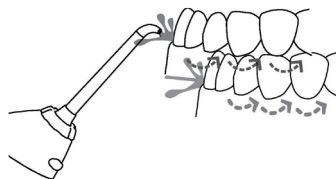

Direcione o jato em um ângulo de 90 graus em sua linha da gengiva.



Feche levemente os lábios para evitar o retorno d'água, mas permitindo que ela caia na pia. Para melhores resultados, inicie pelos molares (dentes traseiros) e vá até os dentes da frente. Passe o jato pela linha da gengiva e pare brevemente entre os dentes. Continue o processo até que todas as áreas em volta e entre os dentes estejam limpas.

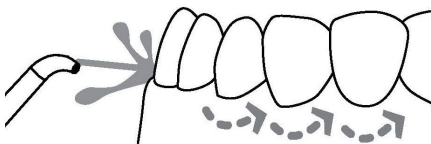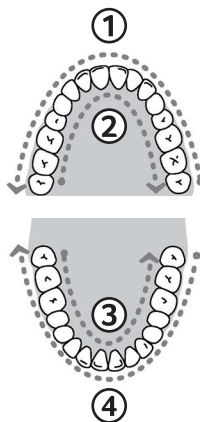

MODO DE DESMONTAGEM

Quando terminar desligue a unidade. Para esvaziar qualquer líquido remanescente no reservatório ou secar a peça, segure o reservatório e o irrigador. Gire as duas peças, uma no sentido horário e a outra no anti-horário para desrosquear o reservatório do irrigador.

Quando terminar desligue a unidade. Para esvaziar qualquer líquido remanescente no reservatório ou secar a peça, segure o reservatório e o irrigador. Gire as duas peças, uma no sentido horário e a outra no anti-horário para desrosquear o reservatório do irrigador.



PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
Vazamento entre os bicos e o cabo	Anel de vedação danificado na base fixa; base fixa não está travada	Entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
A entrada da bomba está vazando	Anel de vedação danificado ou há impurezas na entrada	Entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
Vazamento do reservatório	Funcionamento em Baixa voltagem	Substitua o anel de vedação, entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
Pressão inadequada	Funcionamento em Baixa voltagem	Use após carga completa
O equipamento não liga	Funcionamento em Baixa voltagem	Entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
O equipamento não tem fluxo de água na saída	Funcionamento em Baixa voltagem	Substitua o anel de vedação, entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção

LIMPEZA

Após o uso de qualquer solução especial no reservatório, enxágue-o bem. Preencha parcialmente o reservatório com água morna, mire o jato na pia, ligue a unidade e deixe-o funcionar até que se esvazie o reservatório. Isso impedirá que o bico se entupa e ajudará a sua unidade a durar mais tempo. Limpe o produto quando necessário, usando um pano macio e um produto de limpeza suave e não-abrasivo. Antes da limpeza, desligue o aparelho da tomada. Antes de expor o jato dental a temperaturas congelantes, remova o reservatório e ligue o jato até que esteja completamente vazio.

MANUTENÇÃO

Descarte da Bateria

Antes de ligar pela primeira vez o dispositivo, carregue-o por 24 horas na energia elétrica, para que esteja completamente carregado. Para carregar seu Irrigador Oral, insira o cabo de alimentação em qualquer tomada elétrica padrão. Se o Irrigador Oral for ser guardado por um período longo de tempo, faça uma carga de 24 horas antes de guardar. Para maximizar a vida útil das baterias, o carregador deve ser mantido continuamente conectado à unidade, com a exceção de quando o aparelho estiver sendo usado.

Manutenção da Bateria

A unidade contém uma bateria de lítio. Ao final da vida útil da bateria, recicle a unidade em um centro de reciclagem de aparelhos eletrônicos local de acordo com as exigências estaduais vigentes. A bateria não é substituível.



Manual em outros idiomas

Para baixar este manual em inglês ou espanhol, aponte o seu smartphone para QR Code abaixo e acesse os manuais.

To download this manual in English or Spanish, point your smartphone at the QR Code below and access the manuals.

Para descargar este manual en inglés o español, apunte su teléfono inteligente al código QR a continuación y acceda a los manuales



Termos de Garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multi para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multi. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multi projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multi limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multi pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____/____/____

Queremos muito ouvir você!
CRM – Central de Relacionamento Multi Saúde
11 3198 - 5882 | Cobertura para todo Brasil
Fale conosco via WhatsApp!





Multi

SAÚDE

Acompanhe a gente!

multi.com.vc

Instagram e Facebook: [@multisaude_br](https://www.instagram.com/multisaude_br)

Youtube: OficialMultilaser